



Omistajan käsikirja

Ride® Java® -pehmuste



Ride Designs®

Aspen Seating, LLC:n sivuliike

8100 SouthPark Way
Littleton, Colorado 80120 USA

ilmainen palvelunumero (vain USA:ssa):
866.781.1633
puhelin: 303.781.1633
www.ridedesigns.com

Toimittaja: Tämä käyttöohje on luovutettava tuotteen loppukäyttäjälle, koska se sisältää tärkeitä tuotteen asianmukaiseen käyttöön liittyviä tietoja.

Käyttäjä: Lue koko käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Käyttötarkoitus ja asennusohjeet

Käyttötarkoitus

Ride Designs® Java® -pehmuste on säädettävä pyörätuolipehmuste, joka on huolella rakennettu vastaamaan kehon asentoa sekä ihoa koskevia tarpeita, ja se on suunniteltu siten, että se sopii asennettavaksi useisiin erityyppisiin ja -kokoisiin pyörätuolimalleihin niitä käyttävien henkilöiden tukemisen ja istumaan asettautumisen helpottamiseksi.

Henkilön maksimipaino

Käyttäjän maksimipaino saa olla enintään 160 kg (352 paunaa).

Yleinen tuoteturvallisuus

Tämän tuotteen turvallinen käyttö edellyttää sinun ja palveluntarjoajasi, hoitajasi ja/ tai terveydenhuollon ammattilaisten hyvää harkintakykyä ja tunnollisuuttasi tässä käyttöohjeessa olevien varoitusten, huomautusten ja ohjeiden noudattamisessa.

HUOM: Olemme laatineet tämän käyttöohjeen julkaisuhetkellä saatavilla olevien viimeisimpien teknisten tietojen ja tuotetietojen perusteella. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tarpeen mukaan. Tuotteisiimme tehdyt muutokset saattavat aiheuttaa pieniä eroja tämän käyttöohjeen kuvien ja selitysten ja ostamasi tuotteen välillä. Ota aina yhteyttä lähimpään valtuutettuun Ride Designsin toimittajaan, jälleenmyyjään tai verkkosivustolle www.ridedesigns.com saadaksesi uusinta kirjallisuutta ja tietoa.

VAROITUS: Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa tuotteen vaurioitumiseen tai käyttäjään kohdistuvaan henkilövahinkoon.

Lue tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttöä.

Kaikki Ride Designs -selkätuet ja pehmusteet on suunniteltu vähentämään painehaavojen esiintymistä. Mikään selkätuki tai pehmuste ei kuitenkaan voi täysin poistaa istumapaineita tai estää painehaavoja. Ride Designs -selkätuet ja pehmusteet eivät korvaa hyvää ihonhoitoa, oikeaa ruokavaliota, puhtautta ja säännöllisiä paineenalennustekniikoita.

Pehmusteen asentaminen pyörätuoliin voi vaikuttaa pyörätuolin painopisteeseen ja aiheuttaa pyörätuolin kaatumisen taaksepäin, mikä voi johtaa henkilövahinkoon. Arvioi aina, tarvitaanko pyörätuoliin mahdollisesti kallistuksenestolaitteita tai amputoidun käyttäjän tapauksessa akselin sovituskannattimia vakauden lisäämiseksi.

Ride Java -pehmusteen virheellinen sijoittaminen tai kiinnittäminen pyörätuoliin voi aiheuttaa henkilövahingon. Pyörätuolissasi on oltava täydentävä koukkukiinnitys hihnassa tai kiinteässä istuimessa, jotta pehmuste voidaan kiinnittää kunnolla.

Ride Java -pehmusteen käyttö ilman, että kaikki sen osat, mukaan lukien sisä- ja ulkopäällinen ja vaahtomuovipehmuste, on asennettu oikein, voi aiheuttaa käyttäjään kohdistuvan henkilövahingon.

Jos Ride Java -pehmusteen soveltuvuutta ei arvioida ja jos pehmustetta ei asenneta oikein, käyttäjä voi loukkaantua.


Ride Java -materiaalit toimivat optimaalisesti huoneenlämmössä. Älä jätä pehmustetta alle 5 °C:n (40 °F) lämpötilaan pitkäksi aikaa.

Anna Ride Java -pehmusteen saavuttaa huonelämpötilaa vastaava lämpötila aina ennen sen käyttöä. Liian lämpimillä tai kylmillä pinnoilla istuminen voi aiheuttaa ihovaurioita.

Pyörätuolin kokoonpano ja jalkojen ja selän tukien sopivuus ovat ratkaisevia tekijöitä pyörätuolipehmusteen onnistuneen käytön kannalta. Jos näitä seikkoja ei huomioida asianmukaisesti, seurauksena voi olla käyttäjään kohdistuva henkilövahinko.

Asennus- ja käyttöohjeet

On suositeltavaa, että Ride Designsin sertifioima toimittaja tai terapeutti suorittaa pehmusteen ensiasennuksen. Ride Java -pehmuste yhdessä sen ainutlaatuisen päällysteen kanssa on suunniteltu joko vähentämään kehosi luisiin ulkonemiin kohdistuvaa kuormitusta tai tukemaan ja kannattelemaan luisia ulkonemia sekä eristämään ulkoiset voimat kehon alueisiin, jotka sietävät hierontaa ja painetta. Ride Java -pehmusteen mukana toimitetaan kaksi Ride Gauge -mittaria, joiden avulla voit testata "pohjautumisen". Ride Gauge on kertakäyttöinen arviointiväline, ja sitä käytetään jäljempänä esitetyllä tavalla Ride Java -pehmusteen toimituksen/asennuksen aikana.

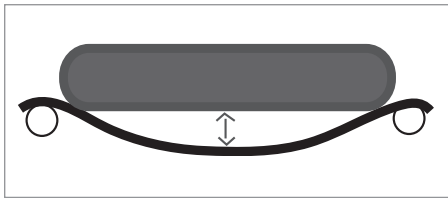

Pyörätuolin valmistelu Ride Forward -pehmustetta varten

Ride Java -pehmuste on suunniteltu niin, että se sopii sekä sling-tyyliseen että kiinteään istuimeen.

HUOM: Jos sling-istuimen tapauksessa pehmusteen pohjan ja sling-verhoilun välissä on rako, verhoilua tulee joko kiristää tai se tulee vaihtaa.

⚠ Ride Java -pehmuste ei saa ulottua yli 2,54 cm:iä (1 tuumaa) pyörätuolin sling-osan tai kiinteän istuimen etuosan ulkopuolelle.

Asenna, arvioi ja säädä Ride Java -pehmusteesi.



Ride Java -pehmusteen ihonsuojaominaisuuksia voidaan säätää kahden mekanismin avulla: Ride CAM® -kiilat istuinkyhmyjen nostamiseen irti alustasta ja valinnaiset kuoppainsertit istuinkyhmyjen kuormituksen säätämiseen. Säätöjä voidaan tehdä milloin tahansa ajan myötä tapahtuvien muutosten kompensoimiseksi. Säädöt ovat täysin palautettavissa ilman, että Java-pehmusteelle aiheutuu mitään vahinkoa.

⚠ Varmista riittävä kudossuoja käyttämällä Ride CAM -kiiloja tarpeen mukaan, jotta istuinkyhmyjesi alapuolelle jää vähintään 1,27 cm (1/2") vapaata tilaa alla olevien ohjeiden mukaisesti. Sovita ja säädä Java-pehmuste aina istuinkyhmyjen nostamiseksi ennen kuin lisäät istuinkyhmyjen tukemiseen tarkoitettuja kuoppainserttejä. Jos istuinkyhmyjen tilaa ei arvioida ja jos tarvittavia säätöjä ei suoriteta, seurauksena voi olla loukkaantuminen.

1. Avaa Ride Java -pehmusteen päällinen (kuva 1).
 2. Aseta yksi Ride Gauge™ -mittari istuinkuoppaan pehmusteen päällisen sisäpuolelle (kuva 2) ja sulje vetoketju.
 3. Aseta pehmusteen takakulmat pyörätuolin takakeppejä vasten (kuva 3).
 4. Kiinnitä pehmuste pyörätuoliin kohdistamalla päällisen pohjassa oleva silmukka-/koukkukiinnitysliippa pyörätuolin hihnassa tai kiinteässä istuimessa olevaan koukku-/lenkkikiinnitysliippaan. Paina pehmuste tiukasti koukku- ja silmukkakiinnikkeisiin varmistaen, että pehmuste on kiinnitetty tukevasti pyörätuoliin.
 5. Siirry pehmusteen päälle siirtämättä mittaria. Saatat kuulla rapisevan äänen, kun mittari puristuu painosi alla. Voit vapaasti liikuttaa pyörätuoliasi, tehdä pyörähdyksiä jne. lyhyen kokeilujakson ajan.
 6. Siirry varovasti pois pyörätuolista mittaria häiritsemättä.
 7. Avaa päällisen vetoketju, katso mittaria ja etsi istuinkyhmyjen ja häntäluun jättämät jäljet. Paina sormellasi mittalaitteen alimpaan painaumaan varmistaaksesi, että vaahtomuovia on jäljellä vähintään 1,27 cm (W"), mikä osoittaa, että nämä luiset ulkonemat tulevat kevennetyksi riittävästi (kuva 4).
 8. Jos vaahtomuovia on vähemmän kuin 1,27 cm (W") istuinkyhmyjen kohdalla, on tarpeen käyttää pehmusteen mukana toimitettuja Ride CAM -kiiloja. Ride Java -pehmusteen mukana toimitetaan kaksi CAM-kiilaa.
 9. Irrota pehmuste pyörätuolista, avaa päällisen vetoketju ja aseta Ride CAM -kiilat (kuva 5) pehmusteen takakulmien reunoissa oleviin vaakasuoriin aukkoihin (kuva 6). Kiilojen yhdistelmiä voi käyttää vapaasti, kunhan kiiloja ei ole yhteensä enemmän kuin kaksi kummallakin tai molemmilla puolilla. CAM-kiiloja voidaan käyttää symmetrisesti istuinkyhmyjen väläksen lisäämiseksi tai yksipuolisesti lantion vinouden kompensointiin.
- Lisää Ride CAM -kiiloja on saatavana valtuutetun Ride Designs -kuntoutustekniikan toimittajan tai valtuutetun jälleenmyyjän kautta. Ride CAM -kiilat ovat yhden koon lisävaruste. Irrota pehmuste pyörätuolista, avaa vetoketju ja aseta Ride CAM -kiilat (kuva 5) pehmusteen takakulmien reunoissa oleviin vaakasuoriin aukkoihin (kuva 6).
10. Työnnä kiilat kokonaan aukkoihin ja leikkaa sitten ylimääräinen kiilamateriaali pois saksilla tai sähköveitsellä pehmusteen sivujen tasalle. Näitä säätöjä voidaan tehdä ajan myötä Ride Java -pehmusteen istuvuuden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.



Jos et pysty saavuttamaan riittävää välystä istuinkyhmyihin, Ride Java -pehmuste ei ole sopiva pehmustevalinta, vaan on harkittava Ride Custom -pehmusteen käyttöä (vain Yhdysvalloissa). Ota yhteyttä Ride Designsiin tai sertifioituun Ride Designsin toimittajaan saadaksesi lisätietoja Ride Custom -pehmusteesta.

Rutiinomaisia arviointeja ja säätöjä on tehtävä, jotta varmistetaan riittävä vapaa tila istuinkyhmyssäsi painonnousun tai lievän pehmusteen puristumisen vuoksi, joita voi esiintyä tuotteen käyttöiän aikana. Jos istuinkyhmyjen tilaa ei arvioida ja jos tarvittavia säätöjä ei suoriteta rutiinomaisesti, seurauksena voi olla loukkaantuminen.

HUOM: Pehmusteesi on ehkä tilattu yhdessä kuoppainserttien kanssa, tai ne voidaan tilata erikseen valtuutetun Ride Designs -kuntoutustekniikan toimittajan tai valtuutetun jälleenmyyjän kautta.

11. Kun Ride CAM -säätö on suoritettu istuinkyhmyjen välilyksen säätämiseksi, voidaan lisätä valinnainen Java-kuoppainsertti ja välilevy, jotka muuttavat pehmusteen ihonsuojominaisuuksia entisestään (kuva 7).

HUOM: Ride Designs suosittelee Java-pehmusteen käyttöä ilman kuoppainserttejä, jotta paineentasaus ja lämmön/kosteuden hallinta olisi mahdollisimman hyvä. Java-kuoppainsertit luovat hienovaraisen kosketuksen ja ympäröivät istuinkyhmyä, mikä voi olla toivottavaa pehmusteen yleisen "tuntuman" parantamiseksi ja/tai hemorrhoidikudoksen hellävaraisen tuen tarjoamiseksi.

12. Avaa Java-pehmusteen päällisen vetoketju ja taita peitteen yläosa eteenpäin, jotta istuinkuopan pinnanmuoto tulee näkyviin.

13. Aseta ylin insertti (komponentti, jossa on "siivet", jotka ulottuvat sivusuunnassa kohti isompia lonkkaniveliä) kuoppaan siten, että kovera nivuskuopan kohouma-alue on suunnattu pehmusteen etuosaa kohti (kuva 8).

14. Aseta pehmusteen ulkopäällinen takaisin paikalleen ja sulje vetoketju kokonaan.

15. Palauta pehmuste takaisin tuoliin ja istu pehmusteen päälle arvioidaksesi sen tuntumaa insertin ollessa paikallaan.

16. Jos haluat lisätukea, avaa vetoketju, poista yläkuopan insertti ja aseta 2,54 cm (1 tuumaa) paksu alakuopan insertin välilevy kuoppaan siten, että kovera nivuskuopan kohouma-alue on pehmusteen etuosaa kohti. Aseta ylin istuinosan insertti 2,54 cm (1 tuumaa) paksun välilevyn päälle nivusten kohokohdan suuntauksen mukaisesti (kuva 9).

17. Palauta pehmuste takaisin tuoliin ja istu pehmusteen päälle arvioidaksesi sen tuntumaa insertin JA välilevyn ollessa paikoillaan.

18. Kun kaikki pehmusteen säädöt on tehty, leikkaa tarvittaessa lisävarusteista ulkoneva materiaali pois, jotta päällinen istuu paremmin. Asenna kansi.

Valinnaiset lisävarusteet

Muita lisävarusteita Java-pehmusteen istuvuuden mukauttamiseksi on saatavana, ja niitä voi ostaa valtuutetun Ride Designs -kuntoutustekniikan toimittajan kautta:

Ride CAM® -kiilasarja

Sen lisäksi, että Ride CAM -kiilat ovat käyttökelpoisia Java-pehmusteen istuinkyhmyjen välilyksen säätämiseen, niitä voidaan käyttää myös lantion vinouden korjaamiseen. Jos kyseessä on joustava ja korjattavissa oleva lantion vinouma, voidaan käyttää jopa kahta CAM-kiilaa lantion vinouman matalalla puolella lantion tasaisemman asennon edistämiseksi.

Mediaaliset ja lateraaliset reisituen insertit

Mediaaliset ja lateraaliset reisitukiinsertit ovat vaihdettavissa, ja ne voidaan asettaa vaahdotuovien yläosan ja jäykän alustan väliin. Tarvittaessa näitä kiiloja voidaan käyttää auttamaan hallitsemaan ja estämään jalkojen abduktiota (jalkojen levittämistä) ja adduktiota (jalkojen sulkemista) Java-pehmusteellä istuttaessa (kuva 10). Lisävarusteena saatavia reisitukiinserttejä on yhtä kaikille sopivaa kokoa. Kiinnitä kiilat pehmusteen pohjan yläosaan vaahdotuovikerroksen alapuolelle kohdistamalla koukku- ja silmukkakiinnikkeet (kuva 11) ja leikkaa tarvittaessa ylimääräinen kiilamateriaali saksilla, sähköllä tai sahalaitaisella veitsellä.



Kuoppainsertti

Java-pehmusteen kuoppainsertit luovat hienovaraisen kosketuksen ja ympäröivät istuinkyhmyjä, mikä voi olla toivottavaa pehmusteen yleisen "tuntuman" parantamiseksi ja/tai hemorroidikudoksen hellävaraisen tuen tarjoamiseksi.

Alustava käyttöaikataulu

Ennen pitkäkestoista istumista on suositeltavaa istua pehmusteen päällä lyhyitä aikoja. Muista tarkistaa jokaisen käyttökerran jälkeen silmämääräisesti kaikki ihoalueet, jotka ovat kosketuksissa pehmusteeseen. Ihossa punoittavan alueen pitäisi hävitä 10-30 minuutin kuluessa.

⚠ Ota yhteyttä lääkäriin tai terapeuttiin, jos punoitus jatkuu yli 30 minuutin ajan, sillä se voi olla merkki ihon rikkoutumisesta ja loukkaantumisvaarasta.

Jos ihotarkastuksissa ei näy yli 30 minuuttia kestäviä punaisia alueita, pidennä istumisaikaa vähitellen (1/2 - 1 tuntiin päivässä). Jatka ihotarkastuksia jokaisen pidemmän istuma-ajan jälkeen. Yleinen suositeltu enimmäisaika istuma-asennossa on kahdesta neljään tuntia. Ihotarkastuksia olisi tehtävä vähintään päivittäin, vaikka iho kestäisikin jo istumista. Jatka rutiininomaisia ajoittaisia paineenalennustekniikoita (joko käsin nostoja tai painonsiirtoja voimakallistuksen avulla) terveydenhuollon ammattilaisen neuvojen mukaisesti.

Seuranta

On suositeltavaa tarkastuttaa istuma-asentosi terveydenhuollon ammattilaisen toimesta samoin kuin ihosi kunto vähintään kerran vuodessa tai aina, kun painosi, asentosi tai yleistilasi muuttuu niin, että se voi vaikuttaa kykyysi istua turvallisesti, mukavasti ja toiminnallisesti.

Java-pehmusteen hoito ja kunnossapito

Java-pehmusteen ulkopäällysteen puhdistaminen

- Irrota Ride Java -pehmuste pyörätuolista.
- Poista pehmusteen ulkopäällinen. Sulje päällinen vetoketjulla.
- Kone- tai käsinpesu lämpimällä vedellä (60 °C / 140 °F, tavallinen pesuaine/ei valkaisuainetta).
- Kuivaa ripustamalla.






Kosteussululla varustetun Java-pehmusteen ylemmän vaahtomuovikerroksen puhdistaminen

⚠ Puhdista Java-pehmusteen vaahtomuovikerros aina käsin. Älä koskaan upota kosteussuojalla varustettua vaahtomuovikerrosta kokonaan mihinkään nesteeseen. Kosteussulkupäällysteessä on vaahtomuovikerroksen alapuolella ilmanvaihtaukkoja, jotka voivat mahdollistaa nesteen imeytymisen sisäiseen vaahtomuoviin ja johtaa kontaminaatioon ja vaahtomuovin ennenaikaiseen vanhenemiseen.

⚠ Älä yritä poistaa kosteussulku ylimmästä vaahtomuovikerroksesta. Kosteussulun poistaminen johtaa pehmusteen ennenaikaiseen vanhenemiseen ja mitätöi takuun.

⚠ Tarkasta kosteussulku säännöllisesti repeämien ja reikien varalta, kun puhdistat Java-pehmustetta. Jos kosteussulku puhkeaa vahingossa, ota yhteys valtuutettuun Ride Designs -liikkeeseen ja hanki paikkaussarja. Pehmusteen käyttö kosteussulun ollessa vaurioitunut voi johtaa tuotteen lisävahingoittumiseen ja ennenaikaiseen vanhenemiseen.

- Suihkuta kotitalouksien desinfiointiainetta kosteussulun likaantuneisiin alueisiin ja pyyhi puhtaiksi kertakäyttöpyyhkeillä.
- Anna ilmakuivua.

Pyykinpesuun liittyvä ohjesymbolit	
	Konepesu lämpimällä vedellä (60° C)
	Älä käytä valkaisuaineita
	Silitämättä siisti
	Älä pese kemiallisesti
	Älä silitä

Java-pehmusteen pohjaosan puhdistaminen

- Upota Java-pehmusteen pohjaosa pesualtaaseen tai ammeeseen, jossa on lämmintä (60 °C / 140 °F) saippuavettä (käytä mietoa pesuainetta) tai laimennettua valkaisuaineliuosta (~¼ kupillista valkaisuainetta 3,8 litraa vettä kohti). Vaihtoehtoisesti voit kaataa edellä määritetyn puhdistusliuoksen kestäväan muovipussiin, johon pehmusteen pohjaosa mahtuu. Laita pehmusteen pohjaosa pussiin ja ravista ja pyöritä pussia varovasti, jotta puhdistusliuos peittää pehmusteen pohjaosan kaikki pinnat. Varmista, että pehmusteen pohjaosa pysyy täysin kyllästettynä vähintään viiden minuutin ajan. Poista pehmusteen pohjaosa pussista.
- Huuhtelevat pehmusteen pohjaosa huolellisesti puhtaalla vedellä käyttämällä apuna käsisuihkua tai lavuaarisuihkua.
- Ravista tai naputtelevat varovasti ylimääräinen vesi pois pehmusteen pohjaosasta. Aseta pehmusteen pohjaosa pystyyn tai nojaamaan seinää vasten imukykyisen materiaalin, kuten froteepyyhkeen, päälle ja anna kosteuden valua pehmusteesta mieluiten ylös. Voit nopeuttaa kuivumista asettamalla pehmusteen pohjaosan tuulettimen eteen.

CAM-kiilojen, sivukiilojen ja kuoppainserttien puhdistaminen

Noudata Ride Java -pohjaosan puhdistusohjeita.

Liekinkestävän vaipan puhdistaminen

Eurooppalaisen syttyvyysstandardin EN-1021-2:2014 mukaisesti Ride Java -pehmusteessasi on palonkestävää materiaalista valmistettu vaippa, joka on asennettu mustan, kosteutta kestäväan sisäkuoren päälle.

⚠ Tämän palonkestävän materiaalin poistaminen vähentää merkittävästi pehmusteen palonkestävyyttä.

Puhdistaminen:

- Poista liekinkestävä vaippa pehmusteesta.
- Kone- tai käsinpesu lämpimällä vedellä (60 °C / 140 °F, tavallinen pesuaine/ei valkaisuainetta).
- Kuivaa ripustamalla.

Ride Java -pehmusteen kokoaminen puhdistuksen jälkeen

- Kun kaikki osat ovat kuivuneet, asenna vahtomuovikerros takaisin pehmusteen pohjaosaan. Varmista tarvittaessa, että Ride CAM ja mediaaliset/sivusuunnassa olevat reisuosat on asennettu takaisin alkuperäisille paikoilleen.
- Vedä liekinkestävä vaippa pehmusteen päälle, pohjaosan ja vahtomuovikerroksen päälle, jossa on valkoinen, kosteutta kestävä päällyste. Vedä edestä taaksepäin. Taita ylimääräinen materiaali pehmusteen alle.
- Aseta koottu pehmuste ulkopäällysteeseen asettamalla pehmusteen etureuna päällysteen kantokahvaa kohti ja venyttämällä sitten päällysteen takakulmat Java-pehmusteen takakulmien päälle. Käännä pehmuste ja päällysteen kokoonpano ympäri ja paina tukevasti pehmusteen etureunoja, jotta saat aloitettua vetoketjun sulkemisen ja sulje sitten vetoketju molemmista päistä kokonaan.
- Aseta pehmuste pyörätuolin päälle ja varmista, että Java-pehmusteen takakulmat koskettavat selkäkeppejä.

⚠ Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa Java-pehmusteen vaurioitumiseen tai käyttäjään kohdistuvaan henkilövahinkoon:

- Älä hankaa pehmusteen pintaa voimakkaasti liinalla tai harjalla sen puhdistamisen aikana.
- Älä taita tai taivuta pehmustetta, kun asetat sen päällysteeseen.
- Älä säilytä painavia tai teräviä esineitä pehmusteen päällä, kun sitä ei käytetä.
- Älä puhdistat pehmustetta isopropyylialkoholilla tai muilla kemiallisilla liuottimilla.
- Älä käytä korkeapainepesuria Java-pehmusteen minkään osan puhdistamiseen.

Tuotteen käyttöikä

Tämän tuotteen suunniteltu enimmäiskäyttöaika on neljä vuotta.

Uusiokäyttö

HENKILÖVAHINKOVAARA: Ota yhteyttä valtuutettuun Ride Designs -jälleenmyyjään ennen tuotteen luovuttamista toiselle käyttäjälle. ÄLÄ käytä tuotetta, jos siinä on vaurioita.

Hävittäminen

♻️ Kierrätä komponentit ja materiaalit paikallisten, valtiollisten ja kansallisten määräysten mukaisesti.

Takuukäytäntö

Ride Java -pehmusteesi on huolella valmistettu vastaamaan pyörätuolissasi istumiseen liittyviä tarpeitasi. Tämä rajoitettu takuu on voimassa 24 kuukautta alkuperäiselle ostajalle tapahtuneesta toimituksesta. Jos materiaali- tai valmistusvirheitä havaitaan, Ride Designs korjaa tai vaihtaa komponentin harkintansa mukaan. Tämä rajoitettu takuu ei kata päivittäistä kulumista tai vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä käsittelystä, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä tai hoito- ja huolto-ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Pehmusteen päällisellä on 90 päivän takuu. Takuu kattaa valmistajan valmistus- ja materiaalivirheistä johtuvat vauriot. Tämä takuu ei koske savukkeen aiheuttamia palamisvaurioita, terävien esineiden päällykseen mahdollisesti repeämiä aiheuttaneita vaurioita, tai vaurioita, jotka johtuvat siitä, että pesuohjeita ei ole noudatettu.

Korvausvaatimukset ja korjaukset on käsiteltävä lähimmän valtuutetun Ride Designs -kuntoutustekniikan toimittajan tai jälleenmyyjän kautta. Voimme mahdollisesti pyytää kopioita tuotteen ostajalle annetusta kauppakirjasta ennen takuuvaatimuksen käsittelyä.



Ride Java -pehmuste toimii parhaiten käytettäessä sitä yhdessä Ride Designs -selkätuen kanssa.

Java Backin patentoidun biomekaanisesti tarkan rakenteen avulla sovittaja voi nopeasti, helposti ja itsenäisesti optimoida lantion tuen ja tasapainottaa vartaloa tavalla, joka jäljittelee kehon normaalia rytmää ja liikettä. Käyttäjä kokee mukavuutta ja vakautta levossa, eikä se häiritse toimintoja ja liikkuvuutta. Java Back -tukia on saatavana valikoimana erilaisia korkeuksia, leveyksiä ja syvyyksiä.

Henkilöiden, joilla on haastavampia asentohallinnan tarpeita, kannattaa harkita Ride Custom -pehmusteita ja Back-tukia (vain Yhdysvalloissa), joka tarjoaa parhaan mahdollisen asentotuen ja ihonhoidon.

Asennukseen liittyvät muistiinpanot

Patentit: www.ridedesigns.com/patents
© 2023, Ride Designs. 090-030-Finnish-A

